

Set 2 – activer le PC/SC

1. Mettez à jour votre logiciel médical.
2. Téléchargez ce fichier http://www.agti.fr/agti_content/uploads/2021/07/drivers-set2-pcsc.zip
3. Décompressez le fichier téléchargé par clic droit **Extraire tout**
Si vous ne le trouvez pas, dirigez-vous dans le dossier téléchargement
4. Ouvrez ensuite **drivers-mode-pcsc\Windows\Setup_Olaqin_LecteurSante_2.0.0.1.exe**
puis suivez les étapes indiquées
5. Renommez le fichier C:\Windows\galss.ini en galssold.ini
6. Désinstallez GALSS v3.xxx de votre ordinateur
7. Redémarrez votre ordinateur
8. Sur le lecteur **Menu** (touche +)




9. **Paramètres** puis validez (touche verte)



10. Descendez sur **Protocole USB** puis validez



11. Sélectionnez **PC/SC** puis validez, le lecteur va redémarrer

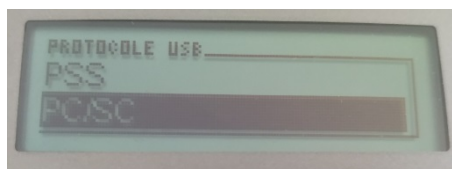



12. Téléchargez ce fichier http://www.agti.fr/agti_content/uploads/2021/10/galss-3.45.01-x64.zip

(Celui-ci si votre pc est en 32 bits http://www.agti.fr/agti_content/uploads/2021/10/galss-3.45.01.zip)

13. Décompressez le fichier téléchargé par clic droit **Extraire tout**
Si vous ne le trouvez pas, dirigez-vous dans le dossier téléchargement

14. Ouvrez le dossier décompressé et lancez **galss-3.45.01-x64.msi** puis suivez les étapes indiquées

Besoin d'assistance ?

03 20 85 11 40