

## IWL 250 – activer le PC/SC

Le basculement de votre lecteur en PC/SC implique que votre logiciel HelloDoc soit dans sa version **SEGUR**.


1. Téléchargez ce fichier [http://www.agti.fr/agti\\_content/uploads/2021/07/drivers-set2-pcsc.zip](http://www.agti.fr/agti_content/uploads/2021/07/drivers-set2-pcsc.zip)
2. Décompressez le fichier téléchargé par clic droit **Extraire tout**  
*Si vous ne le trouvez pas, dirigez-vous dans le dossier téléchargement*
3. Ouvrez ensuite **drivers-mode-pcsc\Windows\Setup\_Olaqin\_LecteurSante\_2.0.0.1.exe**  
puis suivez les étapes indiquées
4. Renommez le fichier C:\Windows\galss.ini en galssold.ini
5. Désinstallez GALSS v3.xxx de votre ordinateur  
*(Démarrer > Paramètres (icône engrenage) > Applications)*

6. Redémarrez votre ordinateur

7. **Menu** (touche F)




8. Validez (touche verte) **EI96**

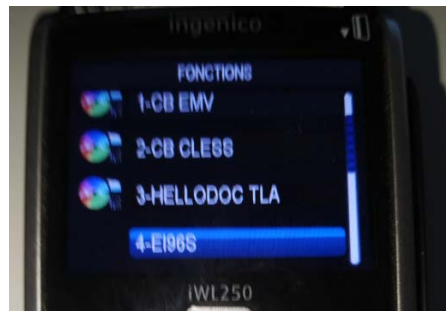

9. Validez **Protocole USB**



10. Sélectionnez **PS/SC** puis **Sauvegarder**

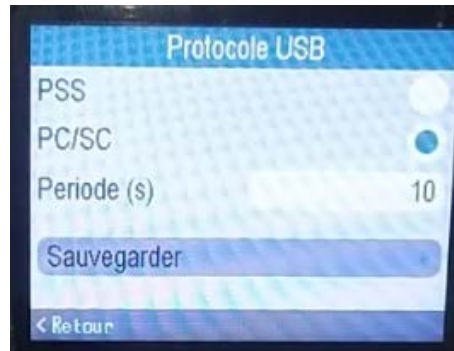

11. Appuyez enfin sur le bouton situé en dessous de Oui



**Besoin d'assistance ?**

**03 20 85 11 40**