

## Vital'act 3s – activer le PC/SC

Le basculement de votre lecteur en PC/SC implique que votre logiciel HelloDoc soit dans sa version **SEGUR**.

1. Téléchargez ce fichier

[http://www.agti.fr/agti\\_content/uploads/2023/01/setup\\_olaqin\\_lecteur\\_sante\\_2.0.0.4.exe\\_.zip](http://www.agti.fr/agti_content/uploads/2023/01/setup_olaqin_lecteur_sante_2.0.0.4.exe_.zip)

2. Décompressez le fichier téléchargé par clic droit **Extraire tout**

*Si vous ne le trouvez pas, dirigez-vous dans le dossier téléchargement*

3. Ouvrez ensuite

`\setup_olaqin_lecteur_sante_2.0.0.4.exe \setup_olaqin_lecteur_sante_2.0.0.4.exe` puis suivez les étapes indiquées

4. Renommez le fichier C:\Windows\galss.ini en galssold.ini

5. Désinstallez GALSS v3.xxx de votre ordinateur

*(Démarrer > Paramètres (icône engrenage) > Applications)*

6. Redémarrez votre ordinateur

7. Sur le lecteur **Menu** (touche ...)




8. Descendez sur **Paramètres applications** puis touche **Valider** (touche verte)




9. Descendez sur **Protocole USB** puis touche **Menu** (touche ...)



10. Choisissez **PC/SC** avec la touche **Menu** (touche ...) puis touche **Valider**

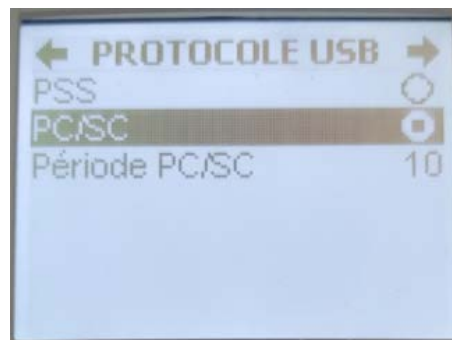

11. Répondez **Oui** par la touche **Valider**

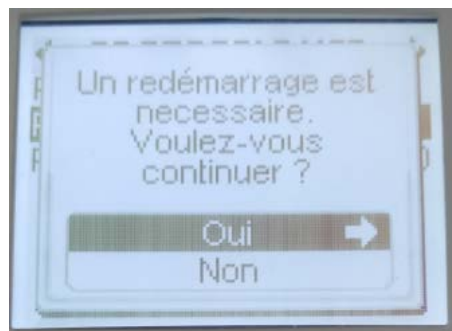

**Besoin d'assistance ?**

**03 20 85 11 40**